



Etac Nova 100 Nostomoottori

Kattonostin vapauttaa käsiä hoitotyöhön

**etac**[®]



Toimintavarmat apuvälineet lisäävät hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta

Nova 100 katonostimien keskeiset lähtökohdat ovat turvallisuus, käytännöllinen muotoilu ja helppokäyttöisyys. Kattonostin vapauttaa kädet hoitotyöhön ja potilaat kokevat nostot myönteisen luotettavina.

Tuoreimpaan teknologiaan perustuva uudentyyppinen Nova 100 nostomoottori on energiaa säästävä ja sen käyntiäänä on hyvin hiljainen. Tehokas nostojärjestelmä yltää vaivatta 250 kiloon asti 6 cm nostonopeudella, tehden nostoista nopeita ja turvallisia. Varoitussignaali hälyttää heti, jos nostimen maksimikapasiteetti ylitetään vahingossa. Hätäkatkaisin ja hätälaskun katkaisin on merkitty selkeästi. Nostotapahtuma käynnistää aina myös akun latauksen pitäen sen jatkuvasti täytenä ja toimintavalmiina. Täyteen ladattu akkutoiminen nostomoottori suorittaa 120 nostoa maksimikuormituksella. Nova katonostimen jatkuva toimintavalmius ja pehmeän joustavat start/stop -toimintojen liikkeet saavat niin nostettavan kuin avustajankin tuntemaan olonsa turvallisiksi nostojen aikana.

Nova katonostin yltää kaikissa nostotilanteissa riittävän laajalle eikä avustajan tarvitse nostaa erikseen esimerkiksi jalkoja sänkyyn ja sängystä. Nostettava henkilö voidaan nostaa ja siirtää haluttuun paikkaan kerralla. Kattonostimen laaja nostokorkeus ja käsin tehtävien nostojen väheneminen edistävät avustajan työergonomia merkittäväällä tavalla.

Etac Nova 100 nostomoottori - Tekniset tiedot

Nostettavan enimmäispaino	250 kg	Akun alentuneen jännitteen varoitusvalo	On
Akun lataaja	3-portainen 24V DC 1,5A max	Max. kuormitt. ylittymisen varoitusvalo	On
Latausaika	7 tuntia	Enimmäismitta katosta (kapea kisko)	2880 mm
Nostonopeus	6 cm/sek	Vähimmäismitta katosta (kapea kisko)	380 mm
Nostomoottorin mitat	325 mm x 165 mm x 184 mm (LxKxS)	Nostoalue	2500 mm
Nostomoottorin paino	10,5 kg	Lataajan sähköliitäntä	100-240V, 50-60Hz
Nostohihna	leveys 35 mm, paksuus 1 mm	Täyttää seuraavat vaatimukset	ISO 10535, EN 60601-1, EN 60601-1-2 MDD/93/42/EEC
Moottorin turvaluokitus	IP20	Takuuaika	6 vuotta
Käsiohjaimen turvaluokitus	IP54		
Hätäkatkaisin	On		
Hätälasku	On		





Nostomoottori asennetaan pikalukituksella ilman työvälineitä, joten se on helppo siirtää huoneesta toiseen.

Alhainen virrankulutus

Nostonopeus 6 cm/sek

Hälytysääni, jos max. kuormitus ylittyy

250 kg max. nostokapasiteetti

Tuote

Nova 100 nostomoottori sis. nostokaaren

Tuotenumero

16019001



Selkeä käsiohjain

Jokaisen on helppoa käyttää Nova 100 nostomoottorin puhdaslinjaista ja ergonomista käsiohjainta, jossa on myös selkeä latauksen merkkivalo. Käsiohjain säilytetään lataustelineessään.



Pikalukitus

Nostomoottorin ja kelkan välinen pikalukitus tekee siitä vaivattoman asentaa ja siirtää paikasta toiseen, ilman työkaluja. Nostomoottoriin siirtämisen huoneesta toiseen voi tehdä kuka tahansa hoitohenkilöstön kuuluva.



Moottoroitu kelkka

Nova 100 nostomoottoria käytetään yhdessä moottorin kanssa helpottamaan raskaampia nostoja. Ajokelkka asetetaan paikoilleen nopeasti ja helposti, ilman työkaluja. Toimitukseen sisältyy 4-toiminen käsiohjain.



Nostokaaren pikalukitus

Nova nostokaari vaihdetaan nopeasti ja yksinkertaisesti pikalukituksella. Nostokaari on kevyt koska lukitusyksikkö kiinnittyy nostohihnaan. Viisi nostokaarityyppiä tarjoaa kattavan, markkinoiden parhaisiin kuuluvan valikoiman.

Oikein valittu nostokaari lisää nostojen vakautta ja mukavuutta

Nostokaarta valittaessa tulee huomioida nostettavan paino ja kehon leveys, fyysinen kokonaistila ja se, millaista nostinta käytetään. Oikein mitoitettu nostokaarella nostoista tulee helpompia, turvallisempia ja vakaampia. Nostokaaren leveyttä määrittää nostettavan hartialeveys. Mikäli nosto tuntuu epämiellyttävältä, ratkaisun tarjoaa kapeampi nostokaari, joka pitää noston koossa.

Etac Nova nostokaaret

Nova nostokaaret ovat painoltaan markkinoiden keveimpiä, helppokäyttöisiä ja vaivattomia puhdistaa. Nostokaaret kiinnitetään pikalukituksella joten kaaren vaihto mallista toiseen käy nopeasti. Nova nostokaaret sopivat katto- ja puominostimiin sekä lattialla liikuteltaviin nostimiin.

Varusteet



Nova 2-pisteen nostokaari, leveys 30 cm

Tuotenumero 81560

Malli soveltuu pienikokoisille aikuisille ja lapsille.

Nostokaari on varustettu pehmustein. Hyvin muotoillut ripustuskoukut.



Nova 2-pisteen nostokaari, leveys 45 cm

Tuotenumero 81561

Yleisesti käytetty peruskoko

Nostokaari on varustettu pehmustein. Hyvin muotoillut ripustuskoukut.




Nova 2-pisteen nostokaari, leveys 50 cm.

Tuotenumero 81562

Leveämpi malli.

Nostokaari on varustettu pehmustein. Hyvin muotoillut ripustuskoukut.

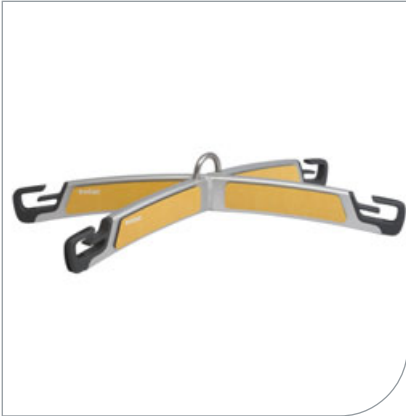


Nova 4-pisteen nostokaari, 50 x 25 cm

Tuotenumero 81563

Käytetään tarvittaessa riittävästi tilaa ylävartalon ja lantion alueelle. Neljä kiinnityspistettä tekee nostoista vakaita. Nostettavan paino jakaantuu liinassa suuremmalle alueelle, mikä lisää nostomukavuutta.

Nostokaari on varustettu pehmustein. Hyvin muotoillut ripustuskoukut.

HUOM! 4-pisteen nostokaarta ei käytetä matalan nostoliinan kanssa.

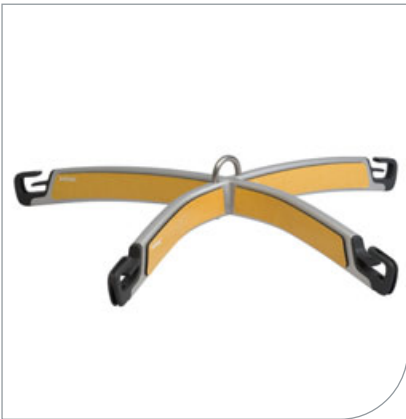

Nova 4-pisteen nostokaari, 50 x 40 cm.

Tuotenumero 81564

Laajempi malli, joka tuo edellistä enemmän tilaa lantiokulmaan. Tällä nostokaari-mallilla liina saadaan tarvittaessa yleensä parhaiten takakeno-asentoon.

Nostokaari on varustettu pehmustein. Hyvin muotoillut ripustuskoukut.

HUOM! 4-pisteen nostokaarta ei käytetä matalan nostoliinan kanssa.



Seinäpidike

Tuotenumero 81568

Seinään kiinnitettävä pidike nostokaarien ja liinojen säilytykseen.



Nova Vaaka

Tuotenumero 81569

Digitaalivaaka Etac Nova 100 nostomoottoriin ja Nova 300 henkilönostimeen.
Max. 350 kg.

Nova henkilönostimet – kehitetty hoitotyön erilaisiin tarpeisiin

Etac suunnittelee, kehittää ja tuo markkinoille tuotteita, järjestelmiä ja apuvälineitä henkilöille, joiden liikunnallinen toimintakyky on alentunut. Tarjonta kattaa erilaisia tuotekokonaisuuksia, jotka auttavat ja helpottavat päivittäisten rutiinien suorittamista fyysiset olosuhteet huomioiden. Yhteistyössä hoitotyön ammattilaisten kanssa Etac on kehittänyt Nova-henkilönostinkokonaisuuden, johon sisältyvät nostoapulaitteet, nostokoulutus ja hoitohenkilöstön henkilökohtainen tuki.

Nova-tuoteperhe on harkittu kokonaisuus, joka käsittää lattialla liikuteltavat henkilönostimet, stand-up -tyyppiset seisontanosto-nostimet, katonostinkokonaisuudet, vapaasti seisovat nostimet sekä nostokaaret ja nostoliinat. Nova-nostoliinujen mallisto ja kokovalikoima on todella laaja.

Etac tekee myös tulevaisuudessa aktiivista kehitystyötä, ettei kenenkään hoitohenkilöstöön kuuluvan enää tänä päivänä tarvitsisi sairastua ennenaikaisesti raskaiden potilasnostojen vuoksi. Asiantuntijamme ovat palveluksessanne ja kartoittavat mahdollisuudet juuri teidän työympäristönne parantamiseksi!

Enemmän tietoa Nova-henkilönostimista: www.stieglmeyer.fi

**Myynti, asennus- ja
huoltopalvelut:**



Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 B, 15800 Lahti
Puh. (03) 753 6320
Fax (03) 753 6330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

etac®