


## Etac Nova 30

Varmatoimiset, ajattomat kiskorakenteet ja älykkäät tekniset ratkaisut, siksi Nova 30 kiskojärjestelmä on helpokäyttöinen ja vaivaton asentaa.

**etac**<sup>®</sup>

## Etac Nova 30 – kevyempi kisko on sujuvampi asentaa

Nova 30 on varmatoiminen ja muotoilultaan virtaviivainen kiskojärjestelmä. Järjestelmä koostuu kolmesta erilaisesta, maksimissaan 8 metrin pituisesta kiskoprofiilista. Markkinoiden kevein kisko on sujuva asentaa ja vaatii vähemmän kiinnityskohtia. Kiinteistön katto- ja seinärakenteista riippuen kiskot asennetaan kattoon, seinään tai lattialle sijoittuvien pilarien varaan.

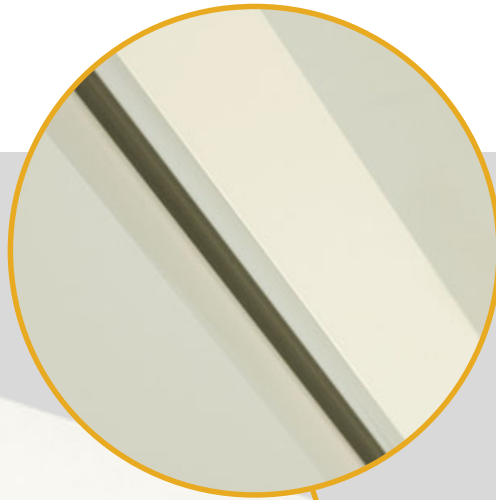

### **Funktionaalinen muotoilu**

Nova 30 on moderni ja huomaamaton kiskojärjestelmä.

Muotoilultaan selkeän kiskojärjestelmän käyttö on vaivatonta myös hoitotyön tekijöille.



### **Sujuva asennustyö ja vähän asennettavaa**

Kuten Nova 30 kiskojärjestelmän toiminnot, on myös sen asennus sujuvaa. Yksinkertaisen muotoilun ansiosta asennettavaa on vähän, minkä lisäksi monet työvaiheet on ennakkoon valmisteltu.


### **15 vuoden takuu**

Etac Nova 30 nostojärjestelmän tuotetakuu on 15 vuotta ja kattaa tuotteen valmistus- ja materiaalivirheet.



### Peitelistat

Käyttämällä peitelistoja kattokiinnitteisten kiskojen päällä voidaan välttää pölykertymiä.

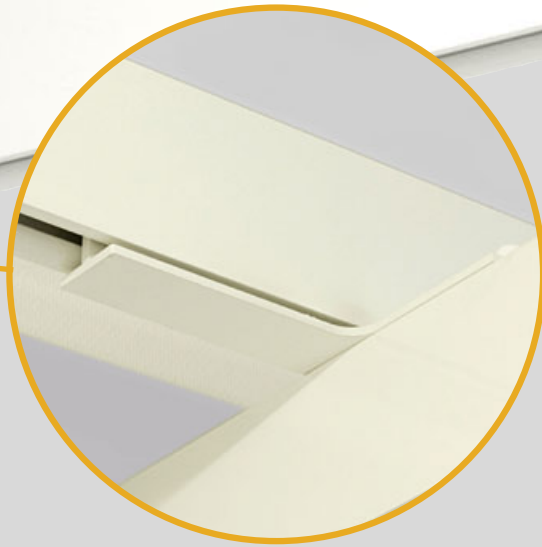

### H-kiskojärjestelmä

H-kiskojärjestelmän huomaamaton ja tyylikäs kelkka, kun nostoalueena on koko huone.

## Etac Nova 30 – tekniset tiedot

Kiskojärjestelmää asentavat vain valtuutetut Etac-asentajat. Suomessa asennuksia suorittavat Stiegelmeier Oy:n hyväksymät, nostinjärjestelmiin perehtyneet asentajat.

<b>Kiskomateriaali</b>	Alumiini	<b>Lattiapilarin leveys</b>	55 mm
<b>Värit</b>	Pulverimaalattu valkoinen tai anodisoitu alumiini	<b>Kattokiskon alareunan ja katon välinen minimietäisyys:</b>	
<b>Kiskoprofiilien korkeus</b>		<b>S</b>	84 mm
<b>S</b>	58 mm	<b>M</b>	148 mm
<b>M</b>	122 mm	<b>L</b>	196 mm
<b>L</b>	170 mm	<b>Nostettavan max.paino</b>	250 kg
<b>Kiskoprofiilien leveys</b>	55 mm	<b>Täyttää ISO 10535 vaatimukset</b>	
<b>Kiinnityskohtien välinen etäisyys</b>			MDD 93/42/EEC
<b>S</b>	1,8 m	<b>Takuuaika:</b>	15 vuotta
<b>M</b>	4,8 m		
<b>L</b>	7,2 m		



## Etac Nova 30 kiskojärjestelmän asennusosat

Kiskojärjestelmän asentamiseen tarvittavien osien ja tarvikkeiden määrä on todella pieni, ja lopputulos on ulkoasultaan viimeistelty, moderni ja tyylikäs.



### Kiskoprofiilit

Kiskoprofiilien koot:  
S (58 mm)  
M (122 mm)  
L (170 mm).  
Värit valkoinen ja ALU  
Materiaali: Alumiini  
Kiskot voidaan tilata sentin tarkkuudella.



### Kaarrekisko 45°

Värit: Valkoinen ja ALU  
Materiaali: Alumiini  
Tuotenumero: 27015



### Kaarrekisko 90°

Värit: Valkoinen ja ALU  
Materiaali: Alumiini  
Tuotenumero: 27014



### Kattokiinnitysosa

Kiinnittää kiskon kattoon vasten.  
Kolme eri asennusvaihtoehtoa.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaali: Teräs  
Tuotenumero: 27019



### Teleskooppipilari

Kiskojärjestelmän asennuskorkeuden madaltamiseen tarkoitettuja viisi erilaista teleskooppipilaria ovat mitoiltaan 100 - 1000 mm. Asennusreiät pilareissa sijaitsevat 5 mm:n välein.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaali: Teräs  
Tuotenumerot:  
27030 100-135 mm  
27031 135-200 mm  
27032 220-345 mm  
27033 345-580 mm  
27034 580-1000 mm



### Seinäkiinnitysosa

Asennetaan kiskon ylä- ja tai alapuolelle.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaali: Teräs  
Tuotenumero: 27020



### Lattiapilari, suora

Vakiopituus 2500 mm, tai vapaasti valittava enimmäismitta 3500 mm. Sisältää jalka- ja kiskokiinnitykset.  
Värit: Valkoinen ja ALU  
Materiaali: Alumiini  
Tuotenumerot:  
27021 Vakio  
27022 1-2500 mm  
27023 2500-3000 mm



### Lattiapilari, taivutettu

Yksöis- tai kaksoistaivutus, tai taivutus lattialistaa mukaillen. Liitos-/yhdistäjäosa ja peitekansi sisältyvät toimitukseen. Yhteensopiva edellä olevan suoran lattiapilarin kanssa.  
Värit: Valkoinen ja ALU  
Materiaali: Alumiini  
27024 Yksöistaivutettu  
27025 Kaksoistaivutettu  
27026 Jalkalista



### Asennusosa kiskon päällisiin asennuksiin

Käytetään kiskojen asennukseen seinäkiinnityskiskon tai lattiapilarin kanssa.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaali: Teräs ja alumiini  
Tuotenumero: 27028



### Kiinteä stoppari

Kiinnitetään asennettujen kiskojen päihin. Sisältyy vakiona perustoimitukseen.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaalit: Teräs ja alumiini  
Tuotenumero: 27016



### Siirreltävä stoppari

Helppo siirtää paikasta toiseen. Voidaan asentaa jälkikäteen.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaali: Teräs ja alumiini  
Tuotenumero: 27017




### Asennuslevyt

Mitoituksen tarkistukseen ja hienosäätöön kattoasennuksissa.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaali: POM  
Tuotenumerot:  
50040 1 mm harmaa  
50041 1 mm valkoinen  
50042 2 mm harmaa  
50043 2 mm valkoinen  
50044 5 mm harmaa  
50045 5 mm valkoinen



### Päätysten peitelevyt

Kiskon päätysten viimeistelyyn.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaali: PP  
Tuotenumero: 50468

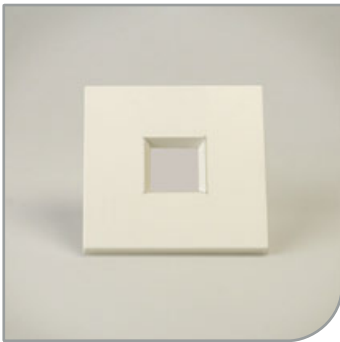

### Peitelevy kattoon

Kiinnitetään kattoon asennuspilarin ympärille peittämään mahdolliset porausreiät.  
Väri: Valkoinen  
Materiaali: ABS  
Tuotenumero: 27038



### Peitelista

Asennetaan katon ja kiskon väliseen tilaan. Kiinnitetään erikoisteipillä.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Materiaali: PP  
Tuotenumero: 50050  
82109: teippirulla



### Kelkka

Sopii myös kaarrekiskoisiin.  
Materiaalit: Teräs, POM, PUR, NBR ja PA-6  
Tuotenumero: 27047



### Moottoroitu kelkka

Sähkömoottori helpottaa liikkumista kiskoilla.  
Materiaali: Teräs, POM, PUR ja NBR  
Tuotenumero: 82162



### H-kiskon kelkka

H-kiskojärjestelmiin, kun nos-  
toalueena on koko huone.  
Värit: Harmaa ja valkoinen  
Materiaali: Teräs, POM, PUR,  
NBR, alumiini ja PA-6  
Tuotenumero: 27049



### T-ruuvi, irtorikka ja mutteri

Kiskojen kiinnityksiin.  
Kaksi pituutta: 30 mm ja  
40 mm.  
Materiaali: Teräs  
Tuotenumerot:  
27036 30 mm  
27055 40 mm



### Liitososat

Kattokiinnitteisten kiskojen  
yhdistämiseen.  
Materiaali: Teräs  
Tuotenumero: 27039



### Liitososa lattiapilariin

Sopii suoralle ja taivutetulle  
lattiapilarille, sis. ruuvit ja  
mutterit.  
Sisältyy taivutetun lattialistan  
toimitukseen.  
Materiaali: Teräs  
Tuotenumero: 27056



### Kiskokiinnike lattiapilariin


Asennetaan lattiapilariin ja  
kiinnitetään kiskoa vasten,  
ylä- tai alapuolelle.  
Värit: Valkoinen ja harmaa  
Tuotenumero:  
82125 Valkoinen  
82124 Harmaa



### Lattiapilarin jalusta


Voidaan sijoittaa suoraan  
esim. märkätilan lattialle.  
Sisältyy lattiapilarin toimi-  
tukseen.  
Väri: Harmaa  
Materiaali: POM  
Tuotenumero: 50470

## Esimerkkejä monipuolisista Nova-kiskojärjestelmistä

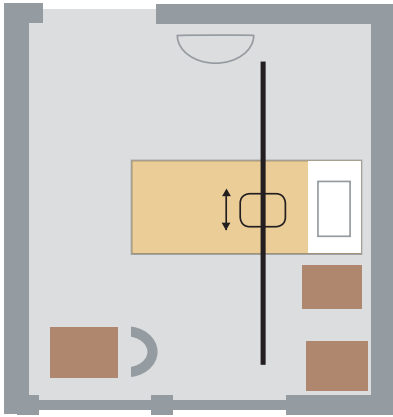


### Suora kisko

Erinomainen ratkaisu, kun huoneen muoto edellyttää perusnostoja sängyn molemmilta puolin.

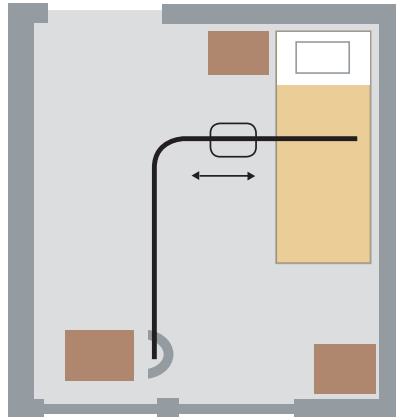

### Kaarrekisko


Kaarikiskon asennus 45° tai 90° kulmaan antaa enemmän vaihtoehtoja huoneessa tapahtuville nostoille. (Vain kattoasennuksena).

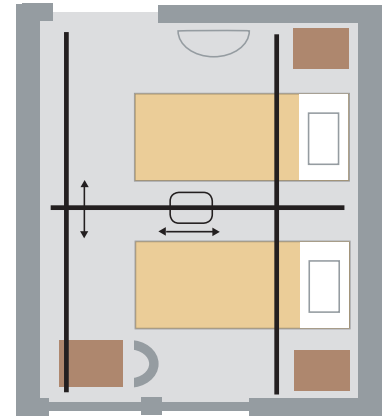

### H-kiskojärjestelmä


Laajempi ratkaisu, sopii myös useamman hengen huoneisiin ja kun nostoalueena on koko huone.

## Asennusesimerkkejä

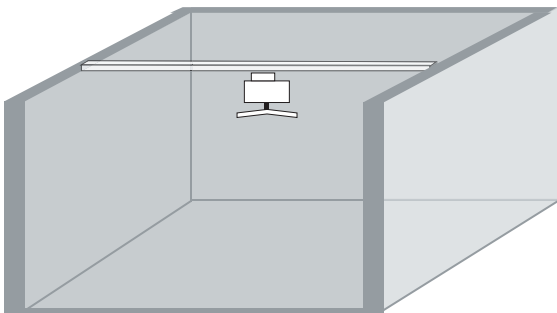


### Kattoasennus

Kattoratkaisuun tarvitaan todella vähän asennuselementtejä ja kiskojärjestelmä on huoneessa huomaamaton.

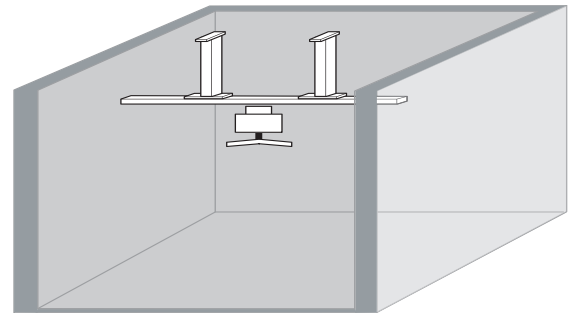


### Kattoasennus teleskooppipilarein

Teleskooppipilareita käytettäessä voidaan kiskojärjestelmää laskea halutulle korkeudelle. Erinomainen asennettaessa korkeisiin tiloihin, joissa on välikatto tai jos sprinklerit, putkistot, sisustuselementit tms. ovat kiskoston käytön esteinä. Teleskooppein kiskosto voidaan tuoda madalletun alakaton pintaan. Teleskooppipilareita on viittä kokoa 10 – 100 cm väliltä.

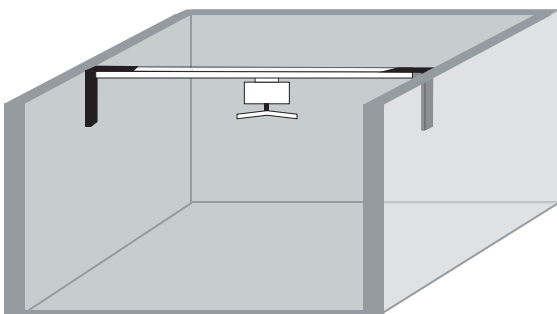

### Seinäasennus

Jos kattorakenteiden kantokyky on riittämätön, voidaan nostojärjestelmä asentaa tukipilareiden varaan huoneen seiniin.

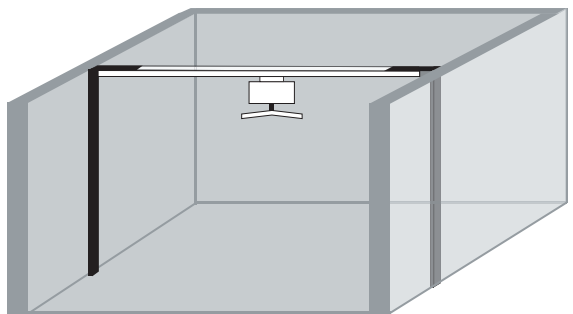

### Lattia-asennus

Jos huoneen katon ja seinien kantokyky on riittämätön, esim. märkätiloissa, täydennetään kattoasennusta lattialle asennetuin tukipilarein. Näin varmistetaan riittävä kantokyky.

## Nova henkilönostimet – kehitetty hoitotyön erilaisiin tarpeisiin

Etac suunnittelee, kehittää ja tuo markkinoille tuotteita, järjestelmiä ja apuvälineitä henkilöille, joiden liikunnallinen toimintakyky on alentunut. Tarjonta kattaa erilaisia tuotekokonaisuuksia, jotka auttavat ja helpottavat päivittäisten rutiinien suorittamista fyysiset olosuhteet huomioiden. Yhteistyössä hoitotyön ammattilaisten kanssa Etac on kehittänyt Nova-henkilönostinkokonaisuuden, johon sisältyvät nostoapulaitteet, nostokoulutus ja hoitohenkilöstön henkilökohtainen tuki.

Nova-tuoteperhe on harkittu kokonaisuus, joka käsittää lattialla liikuteltavat henkilönostimet, stand-up -tyyppiset seisontanosto-nostimet, katonostinkokonaisuudet, vapaasti seisovat nostimet sekä nostokaaret ja nostoliinat. Nova-nostoliinujen mallisto ja kokovalikoima on todella laaja.

Etac tekee myös tulevaisuudessa aktiivista kehitystyötä, ettei kenenkään hoitohenkilöstöön kuuluvan enää tänä päivänä tarvitsisi sairastua ennenaikaisesti raskaiden potilasnostojen vuoksi. Asiantuntijamme ovat palveluksessanne ja kartoittavat mahdollisuudet juuri teidän työympäristönne parantamiseksi!

**Enemmän tietoa Nova-henkilönostimista: [www.stieglmeyer.fi](http://www.stieglmeyer.fi)**

**Myynti, asennus- ja  
huoltopalvelut:**



**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 B, 15800 Lahti  
Puh. (03) 753 6320  
Fax (03) 753 6330  
[stieglmeyer@stieglmeyer.fi](mailto:stieglmeyer@stieglmeyer.fi)  
[www.stieglmeyer.fi](http://www.stieglmeyer.fi)

**etac®**