

Etac Nova 300 - henkilönostin

Helppokäyttöinen ja ketterästi liikkuva Nova 300 on passiivinostin, jota käytetään nostoihin tuolista, sängystä tai lattialta. Huoneesta toiseen kevyesti pyörillä liikkuva henkilönostin on taloudellinen ja aina saatavilla. Laaja nostoalue, vakaa rakenne ja sähköisesti levittyvät jalakset.



Helppokäyttöinen ja ergonominen

Nova 300 henkilönostimilla avustetaan potilaita, joiden liikuntakyky tai voimavarat ovat rajoittuneet. Nostopuomin laaja 47 – 174 cm nostoalue mahdollistaa tehokkaat nostot vuoteesta, toiletista, tuolista tai lattialta. Nostojen monipuolisuutta täydentävät erityyppiset nostokaaret ja Nova-nostoliinat. Nova 300 henkilönostimessa on sähkötoiminen alarungon jalasten portaaton säätö. Nostimen tarkkaan harkittu kokonaisuutoilu tekee siitä käytössä ergonomisen ja turvallisen, erilaisiin tilanteisiin soveltuvan ja helposti puhdistettavan apuvälineen, jolla päästään ahtaissakin tiloissa lähelle kohdetta. Nostimen toimintoja hallitaan helppokäyttöisellä käsiohjaimella.



Nostopuomissa on laaja 47-174 cm nostoalue.

Nostokaaren vaihdot pikalukituksella. Valittavana 5 erilaista nostokaarta, 2- tai 4-pisteiinnityksellä. Nostokaaret yhteensopivat Etac Nova katonostinjärjestelmään.

Hätäkatkaisin, hätälasku ja lataustoiminnot on merkitty selkeästi. Lataus verkkovirralla.

Sähkötoiminen alarungon jalasten levitys portaattomasti.

Tuote

Etac Nova 300 henkilönostin

Numero

16020102


Nova 300 henkilönostimen nostomoottori sijaitsee tukipilareiden välissä, missä se ei häiritse nostettavaa tai avustajan työskentelyä säätöjen ja kuljetusten aikana. Hätäkatkaisin on sijoitettu avustajan lähelle ehkäisemään tahatonta käyttöä. Nova 300 henkilönostimen muotoilussa yhdistyy kaunis ulkoasu erinomaiseen käytettävyyteen.

Etac Nova nostokaaret ja varusteet

Vakaan ja miellyttävän noston osatekijöitä ovat tilanteeseen sopiva nostokaari ja oikein valittu nostoliina. Nova nostokaaret kuuluvat markkinoiden kevyimpiin, sillä niiden pikalukituksen kiinnitysosa sijaitsee nostohihnan päässä nopeuttaen nostokaaren vaihtoa. Nostokaarien kevyt pehmustus tuo lisää käyttömukavuutta.

Nostokaarien pelkistetty rakenne on nopea puhdistaa.

Varusteet

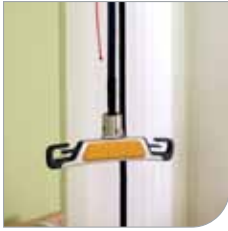

2-pisteen nostokaari,
leveys 30 cm

Tuotenumero 81560



2-pisteen nostokaari,
leveys 45 cm

Tuotenumero 81561



2-pisteen nostokaari,
leveys 50 cm

Tuotenumero 81562



4-pisteen nostokaari,
50 x 25 cm

Tuotenumero 81563

4-pisteen nostokaarta käytetään, kun tarvitaan lisää tilaa ylävartalolle. Nostokaaren neljä kiinnityskohtaa tuo nostoon lisävakausta ja paino jakaantuu laajemmalle alalle, mikä lisää nostettavan mukavuutta.

HUOM! 4-pisteen nostokaarta ei käytetä matalan nostoliinan kanssa.



4-pisteen nostokaari,
50 x 40 cm

Tuotenumero 81564

Edellistä laajempi malli, avaa lantionkulmaa enemmän. Nostokaari, joka antaa liinoihin yleisesti suuremman "takakenoasennon".



Seinäpidike

Tuotenumero 81568

Seinään kiinnitettävä pidike nostokaarien ja liinojen säilytystä varten.



Nova vaaka

Tuotenumero 81569

Digitaalivaaka, max 350 kg. Etac Nova 300 henkilönostimeen ja Etac Nova 100 katonostimeen.



Nostokaaren pehmuste

2-pisteen nostokaaret


Tuotenumero 82424

(30 cm)

Tuotenumero 82423

(45/50 cm)

Suojaa käyttäjää ja nostokaarta, helppo asennus tarrakiinnityksin.

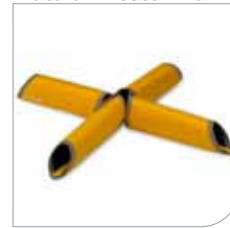

Nostokaaren pehmuste

4-pisteen nostokaaret

Tuotenumero 82425

(50x25 cm)

Tuotenumero 82426

(50x40 cm)

Suojaa käyttäjää ja nostokaarta, helppo asennus tarrakiinnityksin. Toimitetaan 4-osaisena settinä.

Nova 300 - Tekniset tiedot

Nostettavan enimmäispaino:	180 kg	Noudattaa:	
Nostoalue:	47-174 cm	ISO 10535	
80 kg:n nostoja:	kertalatauksella n. 80 kpl	EN 60601-1	
Alarungon jalasten leveys:	64-108 cm/ulkomitta 52-96 cm/sisämitta	EN 60601-1-2	
Alarungon korkeus:	14,5 cm, ø100 mm:n pyörillä	EN 60068-2-32	
Alarungon pituus:	110 cm	MDD 93/42/EEC	
Kääntösäde:	n. 126 cm		
Kokonaispaino:	42,2 kg		
Runko:	pulverimaalattu teräs		
Turvaluokka, moottori/ohjausyksikkö:	IP43		
Turvaluokka, kaukosäädin/akku:	IP65		





Etac Nova henkilönostimet - kehitetty hoitotyön erilaisiin tarpeisiin

Etac suunnittelee, kehittää ja tuo markkinoille tuotteita, järjestelmiä ja apuvälineitä henkilöille, joiden liikunnallinen toimintakyky on alentunut. Tarjonta kattaa erilaisia tuotekokonaisuuksia, jotka auttavat ja helpottavat päivittäisten rutiinien suorittamista fyysiset olosuhteet huomioiden. Yhteistyössä hoitotyön ammattilaisten kanssa Etac on kehittänyt Nova-henkilönostinkokonaisuuden, johon sisältyvät nostoapulaitteet, nostokoulu- ja hoitohenkilöstön henkilökohtainen opastus.

Etac Nova-tuoteperhe on harkittu kokonaisuus, joka käsittää lattialla liikuteltavat henkilönostimet, stand-up -tyyppiset seisomanojanostimet, kattonostinjärjestelmät, vapaasti seisovat nostimet sekä nostokaaret ja nostoliinat. Nova-nostoliinon mallisto- ja kokovalikoima on todella laaja.

Etac tekee myös tulevaisuudessa aktiivista kehitystyötä, ettei kenenkään hoitohenkilöstöön kuuluvan enää tänä päivänä tarvitsisi sairastua enneaikaisesti raskaiden potilasnostojen vuoksi. Asiantuntijamme ovat palveluksessa ja kartoittavat mahdollisuudet juuri teidän työympäristönne kehittämiseksi!

Enemmän tietoja Etac Nova-henkilönostimista: www.stieglmeyer.fi

Myynti, asennus- ja huoltopalvelut:

Valmistus:



STIEGELMEYER

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 B, 15800 Lahti

Puh. (03) 753 6320

Faksi (03) 753 6330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi

Member of Stieglmeyer Group



etac®